


T2 リモートコントロールアプリ (iOS 版)

iOS 版T2 リモートアプリは、お使いの iOS 製品の App Store からインストールできます。

(※App Store の検索欄に「Starkey」と入力して下さい。日本語入力「スターキー」では表示されないで、ご注意ください。)

各機能の操作は、以下のとおりです。

<T2 リモートアプリ操作画面>

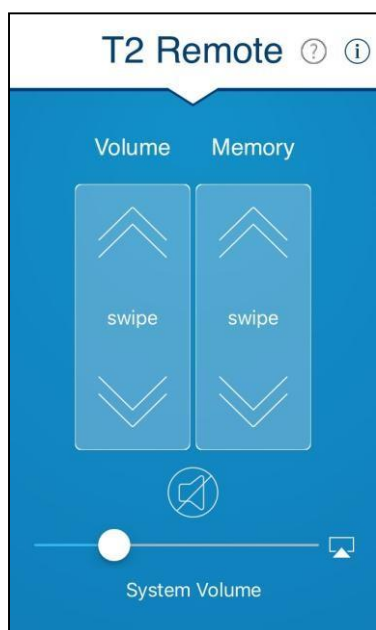

- Volume …ボリュームの増減
- Memory …メモリーの切換え
-  …ミュート（消音）のオン/オフ
- System Volume …ピポパ音の調整 (iOS 製品の音量)

<注意点>

- アプリを使用するには、あらかじめ Inspire（調整ソフト）のユーザーコントロールにて「T2 リモート」にチェックを入れる必要があります。
- 各機能を選択後、3 秒以内に補聴器本体を iOS 製品の受話口に近づけて下さい。
- ピポパ音が大きいと周りの方のご迷惑になりますので、ご使用の際は、ご注意ください

<T2 リモートアプリと互換性のある製品>

	メモリーの切換え	ボリュームの増減	ミュート(消音)のオン/オフ
Muse※1	○	○	○
オトレンズ・シナジー	○	○	○
オトレンズ 2	○	○	○
オトレンズ	○	○	○
3シリーズ※1	○	○	○
X シリーズ※1	○	○	○
S シリーズ※1	○	○	○
ジーノ※2	○	○	○
ジーノTRT	○	○	○
イージーフィット 30	○	○	○

※1 耳かけ型 (RIC・BTE)、耳あな型 (ITE・ITC・CIC) とともに問題なく作動

※2 ジーノ 20 は非対応