



Made for Apple/バッジは、アクセサリが特にバッジが示すApple製品に接続するように設計されており、Appleの性能基準を満たすことが開発者によって確認されていることを意味します。
Appleは、このデバイスの操作、安全、規制基準への適合性について責任を負いません。
iPod、iPhone、またはiPadでこのアクセサリを使用すると、無線性能に影響が出る可能性があることに注意してください。
Apple、Appleのロゴ、Apple TV、Apple Watch、iPad、iPhone、iPod、iPodtouchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
App Store、Sirilは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
GoogleはGoogle LLCの商標です。 Google PlayおよびAndroidはGoogle Inc.の商標です。
本書に記載されているその他の製品名および会社名はそれぞれの会社の商標である場合があります。

Made for
iPhone | iPad | iPod

Download on the
App Store

GET IT ON
Google play

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkeyjp.com

0120-045-190

フリーダイヤル

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

ブログ公開中!



Hear better. Live better.

スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ

※補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。しかし、装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。

◎本カタログに掲載されている補聴器本体は非課税です。

◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。

BROC00175-00-JJ-JP JPYBR-175



MD84856/ISO13485

2022年3月作成

スターキー

Evolv AI (エボルブ エーアイ) カタログ



新しい聴こえの
幕開け

evolv^{AI}

[エボルブ]

ストレスフリー補聴器

身につけて心地良い
欲しい時に欲しい調整
だから疲れない



おかげさまで30周年

新しい聴こえの幕開け

ストレスフリー補聴器

evolv^{AI}
[エボルブ]

マスク生活での
コミュニケーションのストレス
感じていませんか？



ソーシャル
ディスタンス



マスク



口元が
見えない

マスクの邪魔にならない

第2世代
充電式オーダーメイド
耳あな型補聴器 > 6ページ

誰もがストレスフリーな
コミュニケーションの為に

マスクが音声理解に悪影響を与えている事から、
全クラス2dB強化。



耳あな型・耳かけ型

対応
クラス (2400) (2000) (1600) (1200) (1000)

会話強調機能 UPDATE

器 種 \ テクノロジークラス	2400	2000	1600	1200	1000
Evolv AI 2dB強化	最大 22 ↑	最大 10 ↑	最大 8 ↑	最大 8 ↑	最大 8 ↑
Livioシリーズ (従来品)	最大 20	最大 8	最大 6	最大 6	最大 6

* National Acoustic Laboratories (NAL) 研究結果 (2021年8月)より

(単位: dB)

ニュー エラ 補聴器は新時代へ

スターキーサウンドを
新時代に合わせて進化

新登場

Evolv AI (エボルブ エーアイ)



センサー & AI

ヘルサブル > 8~11ページ

音質コア

調整フィッティング計算式,
ハウリング抑制 > 30ページ

音響環境管理

快適 & 雑音抑制 & 指向性 > 30ページ

お客様主導の操作性

エッジモード > 4&9ページ

マスクモード等 > 10ページ

STARKEY
SOUND™

[スターキーサウンド]

新時代に必要なストレスフリー

より疲れないきこえ

最先端技術エッジAIがさらにパワーアップ > 4ページ

選べるラインアップ

マスク対応はもちろん、見た目やパワフルさを重視した追加ラインアップ > 6ページ

つながる3つの安心

補聴器専門スタッフ、ご家族とつながる安心 > 7ページ

より疲れないきこえ

より良い「きこえ」は補聴器ではなく、**あなたが主役**。

補聴器に求められていることは？

自然で豊かな音

大きい音 ×

音の方向感

背景雑音 ×

(MakeTrak10/HIA2019より)

「きこえ = 一人ひとりの感覚」への対応

欲しい時に欲しい調整。だから、ストレスフリー。

✦

エッジモード^{プラス}
UPDATE
どこにいても快適なオンデマンドAI調整

補聴器やスマートフォンを
"簡単ワンタッチ" 瞬間調整

まるで、ベテラン調整スタッフが補聴器の中に居るかのようにその場で瞬間調整します。

学習済AIの調整パターン UPDATE

+ プラス : 72兆パターン追加

対応クラス

2400

2000

1600

* Evolv AI 2000/1600は Thrive アプリが必要です。

ワンタッチ操作

オンデマンドAI 瞬間調整

センサー & AIが
操作前10-15秒間の
音響環境を分析

学習済72兆パターンから
AIがいま必要な調整を
予測してお届け

「調整コミュニケーションで」より疲れない！

専門調整スタッフにも難しい、^{プラス}
聴覚=感覚のコミュニケーションをエッジモード+が解決します。

✓ 調整に通う頻度を減らせます。

お客様が
求めている音は.....
どう調整しようかな.....

✓ 難しい音響環境の説明も不要です。

あの時..... ああ場所.....
聴き取りづらかった感覚.....
どう伝えたらいいかな.....


「今、その瞬間に調整できるから」より疲れない！



「欲しい時に自分で操作できるから」より疲れない！



エッジモード^{プラス}は
「明瞭さ」「快適さ」「音質の好み」**全てでユーザーから好まれました。**

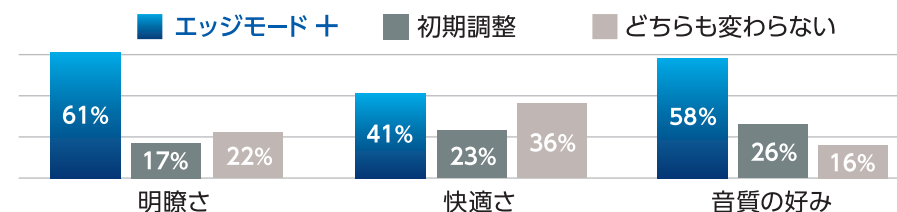

騒がしい音響環境でエッジモードと初期調整をユーザーが比較評価した結果
* 出典: Starkey Laboratories WTPR 2799-00-EE-ST

選べる ラインアップ

お客様の意見から
"充電式耳あな型"が
さらに進化、第2世代へ



IIC* CIC CIC 312 ITC R ITE R RIC 312 RIC R BTE R BTE 13 BTE 13 Power Plus

世界最小サイズの
ワイヤレス耳あな型補聴器



STYLE

スターキーの匠の技(クラフトマンシップ)が
可能にした豊富なラインアップ

対応
クラス 2400 2000 1600 1200 1000

NEW

POWER

高出力な
パワフルタイプ



つながる安心

ご家族やお店のスタッフと
"つながる安心で"生活はより豊かに

安心1 オンライン遠隔調整で つながる




UPDATE

Telehear™ (テレヒア) オンライン調整*

対応
クラス 2400 2000 1600 1200 1000

安心2 万一の時に つながる

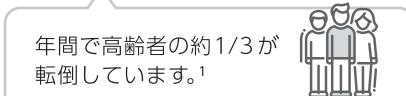

UPDATE

転倒通知 全クラス搭載

対応
クラス 2400 2000 1600 1200 1000

ユーザー本人用 アプリ 無料

スライブ thrive

※ iOS15以上、
Android OS 7.0 以上
(一部の端末のみ) でご利用できます。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

● ユーザー本人用 Thriveアプリの詳細は8・11ページ、29ページをご参照ください。

安心3 リアルタイムに家族と つながる



離れて生活していても、ユーザーの
心身の健康状態を確認できます。

UPDATE

Thrive Care (スライブケア)

対応
クラス 2400 2000 1600 1200

家族用 アプリ 無料

スライブ thrive Care

※ iOS12以上、
Android OS 6.0 以上
でご利用できます。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

* 一部の店舗ではご利用できない場合があります。

¹ Centers for Disease Control and Prevention (2014). Stay independent: prevent falls. Retrieved from: https://www.cdc.gov/steadi/pdf/STeadI_OlderAdultfactSheet-a.pdf

● 非ワイヤレスモデル(IIC・CIC・CIC 312で選択可能)の場合、本ページの機能は利用できません。

進化する補聴器

全テクノロジークラス
センサー & AI対応



スターキーのAI補聴器は
モーションセンサー
世界初搭載*



身体の動きに連動する
操作と専用機能

安心 万一、充電し忘れた朝でも"電池消費は最小限に"

自動オン/オフ スリープモード 放置状態で安心の自動節電



補聴器を外したまま置いておくと、
センサーが装用していないことを感知。
自動的に節電します。

対応
クラス (2400) (2000) (1600) (1200) (1000)

操作方法
ビデオ



完全静止15分間で
節電開始

手に取り耳につけるだけで
節電解除

* スターキー調べ (2019年6月)

簡単 "タップ操作"で手間いらず

※ エッジモード^{プラス} UPDATE どこにいても快適なオンデマンドAI調整



2回タップ
トントン
ピコン
ピコン

タップ操作だけで、センサー&AIが音響
環境を分析し、リアルタイムにオンデマ
ンドでAIが自動調整。(P.4詳細)

対応
クラス (2400) (2000)* (1600)*

*Evolv AI 2000/1600は Thriveアプリが必要です。

操作イメージ
ビデオ



タップコントロール

TVストリーマーなどと簡単タップ接続



1回タップ
トン
ピコン

テレビや会議、習い事などで補聴器を
タップして、専用ワイヤレスアクセサリ*
からのストリーミング切替を簡単に操作。

対応
クラス (2400) (2000) (1600) (1200) (1000)

*ワイヤレスアクセサリ詳細は13ページをご参照ください。

操作方法
ビデオ



VC ボイスコマンド

声で簡単操作



1回タップ
トン
ビーボ

タップしてボイスコマンドを起動、
補聴器をつけたまま声で指示するだけ
で操作できます。

対応
クラス (2400) (2000) (1600)

操作方法
ビデオ



少し音量を上げたい...

🔊「音量上げて」

🔊 ビッ 音量アップ ✓

自宅でスマホをどこに置いたか
わからなくなった...

📞「電話はどこ?」

📞 ビコビコ
ビコン スマホから発信音

受診日を忘れないように...

📅「リマインドを設定して」

🔊 何を思い出させたいですか?

📍「病院」

🔊 いつ思い出させたいですか?

📅「7月24日の7時」

🔊 通知を作成しました

マスク越しの声が
聴き取りづらい...

🎧「マスクモードにして」

🎧 ビロ
ビロン マスクモード ON ✓



※ AIが音声認識するので、使うほどにあなたの声を学習していき使い易くなります。

● 店舗でタップ操作の設定ができます。

📱 マークの機能はスマートフォンが必要です。

安心

より快適、安心な暮らしを

耳は手首よりも正確な健康データを確認できる場所*

転倒通知

UPDATE



万一の時に備える



転倒したことを検知して、連絡したい相手に通知を送信することができます。

対応クラス 2400 2000 1600 1200 1000



リマインド通知

UPDATE



健康的な生活を毎日の習慣から



「薬を飲む」などの予定を、指定した日時に補聴器から音声でお知らせします。

対応クラス 2400 2000 1600 1200 1000



マスクモード

UPDATE




マスク越しの声を聞き取りやすく



マスク越しの言葉を、聞き取れる大きさまで自動で増幅して耳に届けてくれます。

対応クラス 2400 2000 1600 1200

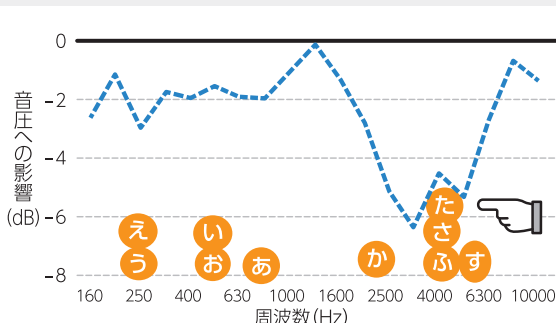

図：マスクを着用していない時とマスク着用時のきこえ
●は音の日本語成分

出典：Starkey Laboratories WTPR2787-00-EE-SG

マスクモードで
子音の聞き取りを補い
言葉をよりクリアに

マークの機能はスマートフォンが必要です。

健康

より快適、活力ある暮らしを

身体と脳の活動をモニタリング

身体健康スコア

運動量と目標がひと目でわかる
[最高 100ポイント]



1日30分歩くと、全身の健康が劇的に向上し、深刻な病気のリスクを減らすことができるとわれています。

対応クラス

2400 2000 1600 1200 1000



歩 数

毎日1万歩以上
歩くことが理想。
[40ポイント]



運 動 量

運動した時間(分)と
消費カロリーを記録。
[40ポイント]



座りすぎ回避

1時間に1分以上身体を動かすことで
座りすぎを回避。
[20ポイント]

脳健康スコア

楽しみながら脳活できる
[最高 100ポイント]



さまざまな環境で補聴器を使用することで脳への良い影響をポイント化します。

対応クラス

2400 2000 1600 1200

使用時間スコア

補聴器を毎日12時間以上
使用することが理想。
[40ポイント]

社会交流スコア

会話や補聴器からの音声ストリーミングに費やした時間を計測。
[40ポイント]

環境リスニングスコア

自宅、屋外、音楽聴取など、あらゆる環境で補聴器が使われているか計測。
[20ポイント]



スライド

Thrive ウェルネススコア

最高200
ポイント

身体健康スコアと脳健康スコアの組み合わせで、
心と身体全体の健康を示す指標となります。

操作方法
ビデオ



スマートフォンの運動性能・アプリについては29ページもご参照下さい。

簡単・便利な スターキーのアクセサリ

聴き取りが難しい状況で
「きこえ」をサポートするワイヤレスアクセサリ。
外出先でもコードレスで充電できる充電器。
補聴器をもっと簡単に、もっと便利にお使いいただけます。

充電器 チャージャーケース

耳あな型用・耳かけ型用

バッテリー非搭載 9,900円(税込)

バッテリー搭載 16,500円(税込)

保証期間 1年

保存ケースにもなる充電器

LEDランプで補聴器が充電されたことをお知らせ、充電器から取り外すと補聴器に自動的に電源が入ります。バッテリー搭載のフル充電のチャージャーケースはコードレスで2台の補聴器を3回分充電できます。



耳あな型用

ITC R
ITE R



耳かけ型用 [RIC R・BTE R 兼用]

RIC R

BTE R



充電器 ミニターボチャージャー

耳かけ型用

11,000円(税込)

保証期間 1年

3泊4日の旅行でも安心

持ち運びに便利なポケットサイズの小型充電器です。フル充電のミニターボチャージャーで2台の補聴器を4回分充電できます。



7分
急速充電で



3.5時間
使用可能

定期的な充電を心がけてください。

ほこり対策のスリープ付



耳かけ型用 [RIC R・BTE R 兼用]

RIC R

BTE R



テーブルマイク

55,000円(税込)

保証期間 1年

会議やディスカッションに参加

マスク、ビニール越しの会話や会議、グループ会話をより楽しみたい方におすすめ。
8個の独立した指向性内蔵マイクが音声をビームのように追従、補聴器にストリーミングします。
付属品：専用アナログ入力ケーブル、モニターイヤホン



Bluetooth



TVストリーマー

33,000円(税込)

保証期間 1年

周りと同じ音量でテレビを楽しめる

テレビまたは他の電子機器から補聴器に安定した音声を直接ストリーミング。光デジタルとアナログ接続の入力信号をサポートします。



Bluetooth



リモートマイク^{プラス}

38,500円(税込)


保証期間 1年

習い事や教室で、話し手が遠い場所で

Bluetooth、テレコイル、FM、音声入力4つの異なる入力音源から多機能ストリーミング。騒がしい環境でも聴きたい人の声を楽に聞けます。指向性マイクも搭載。



スマホと接続してハンズフリー通話ができます

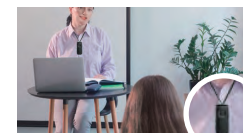

Bluetooth



最大20メートル(外部マイク)

※別売オーディオ入力ケーブルでアナログ入力もサポート



1,320円(税込)

ミニマイク

22,000円(税込)

保証期間 1年

聴きたい人の声を楽に聞く

ボタン1つだけのシンプル設計で話している人の衣服にクリップで留めて使用します。操作性の簡単なミニマイクで、騒がしい環境でも1対1の会話を楽しめます。



Bluetooth



最大20メートル(外部マイク)

Thriveリモコン

22,000円(税込)

保証期間 1年

手元でカンタン調整

メモリーと音量の変更、補聴器のミュート、その他の機能のオン/オフを切り替えることができます。



※アクセサリ一覧は34ページをご覧ください。

おすすめ製品形状ラインナップ

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。

耳あな型

IIC ← ITC → ITE

小ささ重視 バランス オプション選択重視

IIC



極小パーツを使用し、外からほとんど見えません。
※採型された耳の形にて最小のものを作製します。

軽 ▶ 高

CIC 312



CIC 312 装用


Bluetooth +

目立ちにくい
最小ワイヤレス。

軽 ▶ 高

312

適応聴力範囲

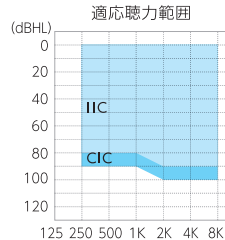

ITC R




耳あな型補聴器の最も標準的なサイズです。

軽 ▶ 重

充電

Bluetooth +

適応聴力範囲

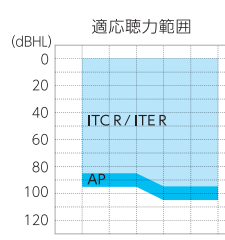

ITE R



耳のくぼみ全体にしっかり納まるタイプです。大きめで操作性も高く、扱いやすいサイズです。

軽 ▶ 重

充電

Bluetooth +

適応聴力範囲



耳あな型 カラーバリエーション



* ココアブラウンはCICのみ、ダークブラウンはIICのみ。

カラーバリエーションは37ページへ

電池の種類

充電 | 充電式

10A PR536 電池 (10A)

312 PR41 電池 (312)

13 PR48 電池 (13)

難聴の程度

軽 軽度難聴

中 中等度難聴

高 高度難聴

重 重度難聴

※ 機種により対応する難聴の程度は若干異なる場合があります。

耳かけ型

RIC / RIC R




Bluetooth +

レシーバー分離タイプの為、本体は小型で目立ちません。着け心地が軽やかで、より自然な「きこえ」になります。

軽 ▶ 高

312 or 充電

適応聴力範囲

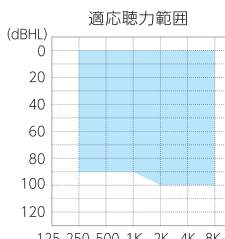

RIC AP



アブソリュートパワー


お客様の耳型に合わせたイヤーマールドで埋込レシーバーを作製。パワー感を重視したRICです。

高 ▶ 重

312 or 充電

Bluetooth +

適応聴力範囲

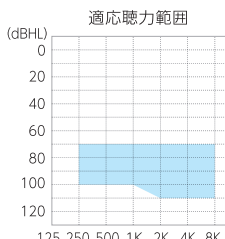

BTE / BTE R




耳かけ型の一般的なタイプです。本体スイッチの操作性も良く、扱いやすいパワータイプです。

軽 ▶ 重

13 or 充電

Bluetooth +

適応聴力範囲

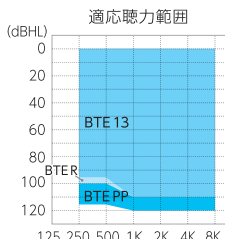

埋込式レシーバー 有料オプション

※ 埋込式カスタムレシーバー (AP: アブソリュートパワー含む) は、補聴器本体と同時に注文の場合、別途10,000円 (非課税) の金額 (保証期間は補聴器に準じます) がかかります。
(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)

耳かけ型 カラーバリエーション ※ 写真は RIC



カラーバリエーションは37ページへ

クラス別おすすめ使用環境

5つのパフォーマンスクラス。
上位クラスの器種は、チャンネル数が多く、騒音抑制や会話強調など、
多彩な機能が搭載され、より賑やかな場所でも聴き取りやすくなります。

Bluetooth [®] 完全ハンズフリー電話(スマホ) ワイヤレスアクセサリ ※iOSのみ対応		音楽専用の計算式で 会話と音楽を同時に処理														掲載ページ
使用環境 クラス	チャンネル (調整バンドル数) 再現周波数	保証期間	自宅 テレビ *	二人 での会話	食事	アウトドア	音楽	グループ での会話	レストラン	旅行 ショッピング	居酒屋 パーティー	車内	鑑賞 (観劇)	人混み		
貴方のためだけの 特別な一台 エクスクルーシブ 2400	24ch 10kHz	3年													18 ページへ	
上質な生活に 欠かせない プレミアム 2000	20ch 10kHz	3年													20 ページへ	
もっと会話が 楽しめる スタンダード 1600	16ch 10kHz	2年													22 ページへ	
基本性能を 備えた ベーシック 1200	12ch 8kHz	2年													24 ページへ	
静かな環境で 安心 エコノミー 1000	10ch 8kHz	2年													26 ページへ	
			静か		にぎやか			とてもにぎやか				複雑に変化				
			2〜3人程度		〜5人程度			〜10人程度				聞き取りが難しい				

* テレビ視聴には、TVストリーマーやテーブルマイクが便利です。
(アクセサリ詳細は13ページをご参照ください。)

----- 特に会議などではテーブルマイクでサポートできます。

ご利用環境や用途に合わせたクラスをお選びください。

よく訪れる場所はどこですか？
「誰と」「どんなシチュエーション」での会話が楽しみですか？



両耳間通信

両耳で装着することでさらに快適にご利用いただけます。詳細は30ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリと直接接続できます。



Made for iPhone | iPad | iPod

GET IT ON Google Play

NEW 最新モデル
軽度～重度難聴

耳あな型


カラーバリエーションは37ページ

充電式

コンパクト
ITC R



Bluetooth

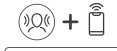

プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電



● ブラック＆ブラック

扱いやすさ＆安定感
ITE R



Bluetooth



プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可

充電



● ブラック＆ブラック

チャージャーケースセット (バッテリー非搭載)	両耳	1,329,900円 ^{*4}
耳あな型専用充電器	片耳	669,900円 ^{*4}

● 充電器については12ページをご覧ください。

電池交換式

目立ちにくい最小ワイヤレス
CIC 312

Bluetooth



プッシュボタン選択可

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル

312



● ブラック＆ブラック

ほとんど目立たない
CIC

プッシュボタン選択可



● ブラック＆ブラック

10A

極小サイズ
IIC



● ブラック＆ブラック

10A

※ 非ワイヤレスモデル：センサー＆AI機能(32ページ)は利用できません。
※ T2リモート対応

両耳	1,300,000円
片耳	650,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 630,000円 / 両耳 1,260,000円

両耳	1,260,000円
片耳	630,000円

耳かけ型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

定番充電スタイル
RIC R



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

充電



● ホワイト＆スターリング

機能一体耳かけ型充電
BTE R



Bluetooth



プッシュボタン

テレコイル

充電



● ホワイト＆スターリング

チャージャーケースセット (バッテリー非搭載)	両耳	1,309,900円 ^{*4}	モニターポ チャージャーセット	両耳	1,311,000円 ^{*5}
耳かけ型専用充電器	片耳	659,900円 ^{*4}	耳かけ型専用充電器	片耳	661,000円 ^{*5}

● 充電器については12ページをご覧ください。

電池交換式

一般的レシーバー分離型
RIC 312



Bluetooth



シーソースイッチ

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

312



● ホワイト＆スターリング

電池長持ち
BTE 13



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

CROS対応可

13



● ホワイト＆スターリング

パワー重視
**BTE 13
Power Plus**



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

13



● ホワイト＆スターリング

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては35-36ページをご参照ください。

*1：期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2：国際保護等級IP68・IP58・IP57取得。完全防水とは異なります。

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)

*3：埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)

*4：充電器(チャージャーケース 税込9,900円)を含みます。

*5：充電器(モニターポチャージャー 税込11,000円)を含みます。



両耳間通信

両耳で装着することでさらに快適にご利用いただけます。詳細は30ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリと直接接続できます。



Made for iPhone | iPad | iPod

GET IT ON Google Play

NEW 最新モデル

軽度～重度難聴

耳あな型


カラーバリエーションは37ページ

充電式

コンパクト
ITC R



Bluetooth

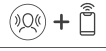

プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電




ページジュ & ページジュ

扱いやすさ & 安定感
ITE R



Bluetooth

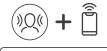

プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可

充電



ページジュ & ページジュ

チャージャーケースセット
(バッテリー非搭載)
耳あな型専用
充電器



両耳

849,900円^{*4}

片耳

429,900円^{*4}

● 充電器については12ページをご覧ください。

耳かけ型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

定番充電スタイル
RIC R



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

充電



スターリング

機能一体耳かけ型充電
BTE R



Bluetooth



プッシュボタン

テレコイル

充電



スターリング

チャージャーケースセット
(バッテリー非搭載)
耳かけ型専用
充電器



両耳

829,900円^{*4}

片耳

419,900円^{*4}

モニターポ
チャージャーセット
耳かけ型専用
充電器



両耳

831,000円^{*5}

片耳

421,000円^{*5}

● 充電器については12ページをご覧ください。

電池交換式

目立ちにくい最小ワイヤレス
CIC 312

Bluetooth



プッシュボタン選択可

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル




ページジュ & ページジュ

312

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 390,000円 / 両耳 780,000円

ほとんど目立たない
CIC

プッシュボタン選択可

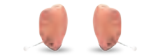

ページジュ & ページジュ

10A

極小サイズ
IIC



ページジュ & ページジュ

10A

※ 非ワイヤレスモデル：センサー&AI機能(32ページ)は利用できません。
※ T2リモート対応

両耳 780,000円
片耳 390,000円

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては35-36ページをご参照ください。

*1：期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2：国際保護等級IP68・IP58・IP57取得。完全防水とは異なります。

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)

電池交換式

一般的レシーバー分離型
RIC 312



Bluetooth



シーソースイッチ

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

312



スターリング

電池長持ち
BTE 13



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

CROS対応可

13



スターリング

パワー重視
**BTE 13
Power Plus**



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

13



スターリング

*3：埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)

*4：充電器(チャージャーケース 税込9,900円)を含みます。

*5：充電器(モニターポチャージャー 税込11,000円)を含みます。



両耳間通信

両耳で装着することでさらに快適にご利用いただけます。詳細は30ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリと直接接続できます。



Made for iPhone | iPad | iPod

GET IT ON Google Play

NEW 最新モデル

軽度～重度難聴

耳あな型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

コンパクト

ITC R



Bluetooth



プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電

●ブラック & ブルー/レッド

扱いやすさ & 安定感

ITE R



Bluetooth



プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可

充電

●ブラック & ブルー/レッド

チャージャーケースセット
(バッテリー非搭載)

両耳

629,900円^{*4}

耳あな型専用
充電器

片耳

319,900円^{*4}

●充電器については12ページをご覧ください。

電池交換式

目立ちにくい最小ワイヤレス

CIC 312

Bluetooth



プッシュボタン選択可



●ブラック & ブルー/レッド

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル

312

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 280,000円 / 両耳 560,000円

両耳

600,000円

片耳

300,000円

ほとんど目立たない

CIC

プッシュボタン選択可



●ブラック & ブルー/レッド

10A

極小サイズ

IIC



●ブラック & ブルー/レッド

両耳

560,000円

片耳

280,000円

※ 非ワイヤレスモデル：センサー&AI機能(32ページ)は利用できません。

※ T2リモート対応

耳かけ型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

定番充電スタイル

RIC R



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

充電


●シャンパン

機能一体耳かけ型充電

BTE R



Bluetooth

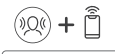

プッシュボタン

テレコイル

充電

●シャンパン

チャージャーケースセット
(バッテリー非搭載)

両耳

609,900円^{*4}

耳かけ型専用
充電器

片耳

309,900円^{*4}

モニターポ
チャージャーセット

両耳

611,000円^{*5}

耳かけ型専用
充電器

片耳

311,000円^{*5}

●充電器については12ページをご覧ください。

電池交換式

一般的レシーバー分離型

RIC 312



Bluetooth



シーソースイッチ

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

312

●シャンパン

電池長持ち

BTE 13



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

CROS対応可

13

●シャンパン

パワー重視

BTE 13
Power Plus



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

13

●シャンパン

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては35-36ページをご参照ください。

*1：期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2：国際保護等級IP68・IP58・IP57取得。完全防水とは異なります。

●補聴器は両耳装着をおすすめします。 ●補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)

*3：埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)

*4：充電器(チャージャーケース 税込9,900円)を含みます。

*5：充電器(モニターポチャージャー 税込11,000円)を含みます。



両耳間通信

両耳で装着することでさらに快適にご利用いただけます。詳細は30ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリと直接接続できます。



Made for iPhone | iPad | iPod

GET IT ON Google Play

NEW 最新モデル

軽度～重度難聴

耳あな型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

コンパクト

ITC R



Bluetooth



プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電

ベージュ & ブルー/レッド

扱いやすさ & 安定感

ITE R



Bluetooth



プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可

充電

ベージュ & ブルー/レッド

チャージャーケースセット
(バッテリー非搭載)
耳あな型専用
充電器

両耳

469,900円^{*3}

片耳

239,900円^{*3}


● 充電器については12ページをご覧ください。

電池交換式

目立ちにくい最小ワイヤレス

CIC 312

Bluetooth

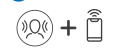

プッシュボタン選択可



ベージュ & ブルー/レッド

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル

312

両耳

440,000円

片耳

220,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 200,000円 / 両耳 400,000円

ほとんど目立たない

CIC

プッシュボタン選択可



ベージュ & ブルー/レッド

10A

両耳

400,000円

片耳

200,000円

※ 非ワイヤレスモデル：センサー&AI機能(32ページ)は利用できません。
※ T2リモート対応

耳かけ型

カラーバリエーションは37ページ

充電式

定番充電スタイル

RIC R



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)^{*2}

CROS対応可

充電

● エスプレッソ

チャージャーケースセット
(バッテリー非搭載)
耳かけ型専用
充電器

両耳

449,900円^{*3}

片耳

229,900円^{*3}


● 充電器については12ページをご覧ください。

機能一体耳かけ型充電

BTE R



Bluetooth

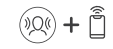

プッシュボタン

テレコイル

充電

● エスプレッソ

モニターポ
チャージャーセット
耳かけ型専用
充電器

両耳

451,000円^{*4}

片耳

231,000円^{*4}

電池交換式

一般的レシーバー分離型

RIC 312



Bluetooth



シーソースイッチ

AP選択可(有料)^{*2}

CROS対応可

312




● エスプレッソ

電池長持ち

BTE 13



Bluetooth

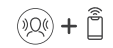

シーソースイッチ

テレコイル

CROS対応可

13




● エスプレッソ

パワー重視

**BTE 13
Power Plus**



Bluetooth

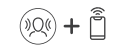

シーソースイッチ

テレコイル

13



● エスプレッソ

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては35-36ページをご参照ください。

*1：国際保護等級IP68・IP58・IP57取得。完全防水とは異なります。

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)

*2：埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)

*3：充電器(チャージャーケース 税込9,900円)を含みます。

*4：充電器(モニターポチャージャー 税込11,000円)を含みます。



両耳間通信

両耳で装着することでさらに快適にご利用いただけます。詳細は30ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリと直接接続できます。



Made for iPhone | iPad | iPod

GET IT ON Google Play

NEW 最新モデル

軽度～重度難聴

耳あな型

カラーバリエーションは37ページ


充電式

コンパクト

ITC R



Bluetooth

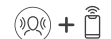

プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電


● ブラック & クリア

扱いやすさ & 安定感

ITE R



Bluetooth

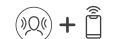

プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可

充電

● ブラック & クリア

チャージャーケースセット
(バッテリー非搭載)
耳あな型専用
充電器

両耳
片耳

389,900円^{*3}

199,900円^{*3}

● 充電器については12ページをご覧ください。

耳かけ型

カラーバリエーションは37ページ


充電式

定番充電スタイル

RIC R



Bluetooth

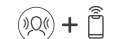

シーソースイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)^{*2}

充電


● ブロンズ

機能一体耳かけ型充電

BTE R



Bluetooth

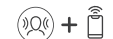

プッシュボタン

テレコイル

充電

● ブロンズ

チャージャーケースセット
(バッテリー非搭載)
耳かけ型専用
充電器

両耳
片耳

369,900円^{*3}

189,900円^{*3}

モニターポ
チャージャーセット
耳かけ型専用
充電器

両耳
片耳

371,000円^{*4}

191,000円^{*4}


● 充電器については12ページをご覧ください。

電池交換式

目立ちにくい最小ワイヤレス

CIC 312

Bluetooth

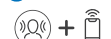

プッシュボタン選択可



● ブラック & クリア

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル

312

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 160,000円 / 両耳 320,000円


両耳 360,000円

片耳 180,000円

ほとんど目立たない

CIC

Bluetooth

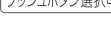

プッシュボタン選択可



● ブラック & クリア

10A

※ 非ワイヤレスモデル：センサー&AI機能(32ページ)は利用できません。
※ T2リモート対応

両耳 320,000円

片耳 160,000円


電池交換式

一般的レシーバー分離型

RIC 312



Bluetooth

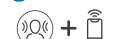

シーソースイッチ

AP選択可(有料)^{*2}



● ブロンズ



埋込式
レシーバー
有料オプション


312

パワー重視

BTE 13
Power Plus



Bluetooth

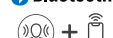

シーソースイッチ

テレコイル



● ブロンズ


13

電池長持ち

BTE 13



Bluetooth

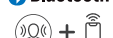

シーソースイッチ

テレコイル



● ブロンズ

13

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては35-36ページをご参照ください。

*1：国際保護等級IP68・IP58・IP57取得。完全防水とは異なります。

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)


*2：埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、36ページをご参照ください。)

*3：充電器(チャージャーケース 税込9,900円)を含みます。

*4：充電器(モニターポチャージャー 税込11,000円)を含みます。

CROS 補聴システム RIC R | RIC 312 | BTE 13

CROSシステムは、聴力が良いほうの耳へ音を送るために特別に設計された製品です。聞こえない耳に装着されたクロス送信機のマイクから、反対側の耳に装着された補聴器にワイヤレスで音声を送信します。聴力が良いほうの耳で補聴器として使用するバイクロス送信機として構成することもできます。

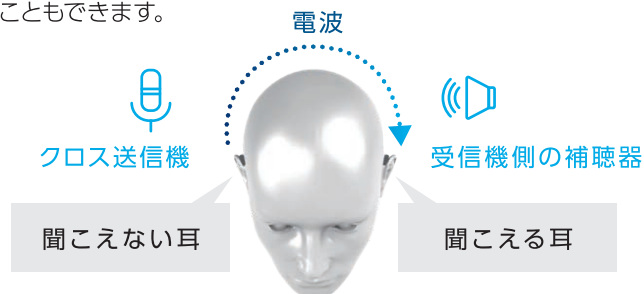

- 特長**
- 2.4GHz + NFMIテクノロジーを使用した、クリアで安定したワイヤレスストリーミング
 - CROS 補聴器で利用可能なテレコイル (RIC R・RIC 312・BTE13)
 - ワイヤレスアクセサリーの使用
- カラー**
- 耳かけ型カラーバリエーション (37ページ) と同一

Evolv AI CROS補聴システム			
使用電池	充電	312	13
送信機	RIC R CROS	RIC 312 CROS	BTE 13 CROS
対象機種	RIC R (2400-1200)	RIC 312 (2400-1200)	BTE 13 (2400-1200)
保証期間	1年		
価格	110,000円 (税込)		

*1 国際保護等級IP68・IP58取得。完全防水とは異なります。
 ※ 送信機は、Evolv AIの各対応機種との組み合わせでのみご利用できます。
 ※ 電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入の前に必ず専門医にご相談ください。
 ※ 1000 (エコノミークラス) には対応しません。
 ※ 耳かけ型パーツについては36ページをご参照ください。
 ※ CROS補聴システムは、ワイヤレス通信を常時使用するため電池を消耗します。RIC R CROSで連続使用14時間が目安となります。

スマートフォンとの連動性能

あなたの自由を叶えるアプリ体験



きこえのカスタマイズ

さまざまな状況で
自分好みに微調整できます。



補聴器を探す

補聴器を見失ってしまった時、
捜し当てることができます。



もっと電話で話したい

ハンズフリーで通話を楽しめます。



リモコン機能

音楽やプログラムの変更など、
手元で簡単に操作できます。



ワイヤレスアクセサリー

アプリからワイヤレスアクセサリーを
操作できます。




私だけの“きこえ”を 自分でつくりたい

あなただけのメモリープログラムを
作成できます。場所を設定しておけば、
その場所に着いた時に自動感知して
音質を切り替えることができます。



運転モード

自動車や電車などで移動すると、
スマートフォンの位置情報と連動して
「乗り物」メモリーに自動で切りかわ
ります。

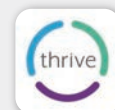

Thrive
Hearing Control
Starkey Laboratories

※ ご使用の前にお使いのiOSデバイス (iPhone, iPad, iPod touch等) のソフトウェアバージョンが最新 (iOS 15以上) になっていることを確認して下さい。
 ※ アプリ詳細は www.starkeyjp.com/hearing-apps をご参照下さい。

スライプ
thrive™

アプリのダウンロード **無料**

App Storeで「スターキー」と検索もしくは右のQRコードから
「Thrive Hearing Control」をダウンロードできます。



対応スマートフォンに関する情報 ※ 制限がありますので事前にご確認ください

スマートフォンとの接続性については、右のQRコードもしくは、
www.starkeyjp.com/hearing-aids/thrive-hearing/smartphone-compatibility を事前
にご参照ください。スターキーホームページ www.starkeyjp.com 「対応スマホ一覧」からも
ご確認いただけます。(Androidは一部の端末のみ対応)



クラス別 機能・保証比較表

分類	機 能	機 能 説 明
音 質 コ ア	チャンネル/バンド数	音の帯域を複数に分割することで、よりありのままのサウンドを再現します。
	再現周波数	高音域まで再現することで音質が向上します。
	ハウリング抑制	定評のある独自のハウリング抑制システムで不快なピーピー音から解放します。
	参照型OCL	音量感と共に自声の違和感を改善し、より自然な音質を届ける新しい圧縮型出力制限。
両 耳 機 能	空間スピーチエンハンス	賑やかな場所で正面の話し相手との会話に集中できます。
	風の中でのことば	強い風の中でも、左右の補聴器が風の影響を少なくし、会話を聞き取りやすくします。
	音楽 (BGM) 強調	左右の補聴器の音質を連動させ、より自然にBGMを楽しめます。
	両耳ストリーミング	スマホでの通話の音声は左右両方の補聴器から自動でバランス良く聞こえる機能です。
	ユーザーコントロール連動	片方の補聴器への操作で、左右両方の補聴器を同時に操作できます。
快 適	音楽専用処理	音楽を楽しむための独自の計算式で、ありのままの自然なサウンドを届けます。
	会話強調機能	独自の技術で言葉と騒音を高速で分析し、声と声の間にある雑音さえも抑制します。
	衝撃音抑制	突発的に響く大きな音を抑制し、聞き取りの快適さを向上させます。
雑 音 抑 制	風切り音抑制	風切り音を効果的に抑制。屋外でも聞き取りやすくします。
	機械音抑制	ミキサーや掃除機など大きな定常的な音がある場合に抑制します。
	ソフト入力雑音抑制	冷蔵庫やエアコンの小さくわずらわしい音を抑えることで、言葉をより聞き易くします。
*1 指 向 性	空間認識指向性	耳が持つ自然な音の方向感を復元します。
	指向性モード	言葉の自然な聞き取りを向上するために、会話と雑音を選り分けます。
カ ス タ マ イ ズ	ハンドル数	フィッティング時に調整できる音域の細かさ。数字が大きいほど細かくできます。
	メモリープログラム数	PC調整で設定できる最大メモリー数 (標準、レストランなど)。
	完全ハンズフリー	iPhone11以降 (iOS15.1以降)をお使いの場合、通話時に補聴器のマイクで自声を拾います。
	オンライン調整*2	ご自宅に居ながら調整が可能なアプリでの遠隔調整機能。
*4 通 信 機 器	スマートフォン	スマートフォンと接続して通話、音楽ストリーミングができます。(詳細はP.29参照)
	ワイヤレスアクセサリー	ワイヤレスアクセサリーを利用して、聞き取りやすさ、使い勝手が向上します。
	CROS システム	CROS送信機のマイクで音を捉えて、反対側の補聴器に音声を届けます。
保 証	修理保証	無償にて修理対応を行います。*3
	紛失保証	補聴器の紛失時に、無償にて同等品の提供または修理対応します。

2400		2000		1600		1200		1000	
耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ
24		20		16		12		10	
10KHz		10KHz		10KHz		8KHz		8KHz	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
—	★★★★*5	—	★★★★*5	—	★★*5	—	—	—	—
★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★	—	—	—	—
★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★	—	—	—	—
—	○*5	—	○*5	—	○*5	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○		○		○		—		—	
最大 22dB		最大 10dB		最大 8dB		最大 8dB		最大 8dB	
最大 15dB		最大 9dB		最大 6dB		最大 6dB		最大 6dB	
最大 30dB		最大 15dB		最大 7dB		最大 7dB		最大 7dB	
最大 20dB		最大 10dB		最大 5dB		最大 5dB		最大 5dB	
★★★★★		★★★		★★		★		★	
○		○		○		○		—	
追従型 24ch		追従型 20ch		追従型 16ch		追従型 12ch		固定型自動切替	
24		20		16		12		10	
4		4		4		4		4	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
—	○*5	—	○*5	—	○*5	—	○*5	—	—
3 年		3 年		2 年		2 年		2 年	
2 年 1 回		2 年 1 回		1 年 1 回		— *6		— *6	

*5：RIC R / RIC 312 / BTE 13のみ対応します。

*6：耳あな型のみの納入後120日間の紛失保証となります。

※ センサー & AIの機能比較は32ページをご参照ください。

クラス別 センサー&AI (ヘルサブル) 機能比較※

分類	機能	どのような機能？	どのような時に利用？	2400	2000	1600	1200	1000
きこえ ヒ어링パフォーマンス	 エッジモード + UPDATE	いつでも、どこでも、あなたが欲しいと思った時に、AIが音質を調整してくれる 	いつ・どんな場所でも、聴き取りに我慢したくないときに		 *3	 *3	—	—
	 ボイスコマンド	タップしてつぶやくだけで補聴器を音声操作できる	時間をかけずに操作したい	VC	VC	VC	—	—
	 タップコントロール	トントンするだけでストリーミングの開始と停止ができる 						
	 ボイスAI	利用すればするほど、AIが音声を学習する遠隔マイク(条件あり)*1	ささやき声を聞き逃したくないときに		—	—	—	—
	 マスクモード	マスク越しの声を聴き取りやすくする	病院やコンビニのレジでの会話など聞き逃したくないときに					—
	 自動オン/オフ	置きっぱなしにしても15分で自動的に省エネモード 	補聴器を放置してしまい放電してしまうとき					
	 セルフチェック	補聴器の内部の状態をスマホが診断してくれる	突然聞こえなくなっても、どうしたらいいかはスマホでチェック					
ヘルスケア 健康とウェルネス	 TeleHear オンライン調整 *2	補聴器をオンラインで調整できる	自宅に居ながら、補聴器のことを相談したい					
	 身体の健康スコア	運動量を毎日ゲーム感覚で管理できる	心身ともに健康的な生活を送りたい					
	 脳の健康スコア	脳の活性につながる行動を無理なく管理できる						—
	 転倒通知 UPDATE	転んだ時にスマホから登録先にメッセージを送信	万が一のときでも家族が安心できる					
情報アシスタント AIアシスタント	 Thriveケア UPDATE	離れた場所から補聴器の使用状況をモニタリング	家族が離れた場所にいてもあなたを見守ってくれる					—
	 電話を探す	スマートフォンを置いた場所を補聴器が教えてくれる	家の中でスマートフォンが行方不明になったとき				—	—
	 リマインド通知 UPDATE	思い出したいことを、思い出したい時に補聴器が教えてくれる	薬の飲み忘れなど、もの忘れの防止に便利					
	 文字起こし	会話相手の言葉を文字に起こしてくれる	会議で、講習会で、聞き逃したくない内容を文字で残す			—	—	—
	 音声翻訳	27種類の言語から聞きたい言葉をその場で翻訳	海外旅行や語学学習で慌てる必要なし		—	—	—	—

*1：iOS利用、両耳装着、250-500Hzで50dBHL以上の聴力レベルであることが動作条件です。

*2：TeleHear オンライン調整は一部の店舗ではご利用できない場合があります。



*3：Evolv AI 2000/1600はThriveアプリが必要です。

※ 非ワイヤレスモデル (IIC・CIC・CIC 312で選択可能) の場合、センサー & AI機能は利用できません。

 ... 補聴器単体で操作できる機能です
(2022年3月現在)

アクセサリ

クリーニング・ケア

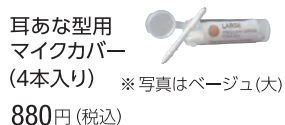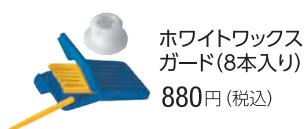


器種	サイズ	カラー(2種)
ITE	大	ページ ブラック
ITC		ページ ブラック
CIC	小	ページ ココアブラウン
CIC312		ページ ブラック




ご注文時、補聴器の製品名とカラーをお知らせください。

充電器関連

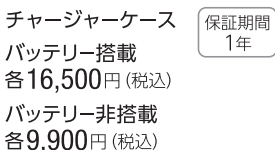



空気電池関連

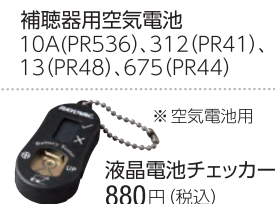

ケース





ワイヤレスアクセサリ

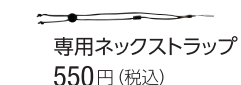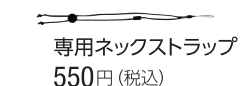

耳あな型カスタマイズオプション

お客様それぞれの「きこえ」やライフスタイルに合わせて、最適な状態でお使いいただくために、スターキーは豊富なオプションをご用意しております。

各オプション参考

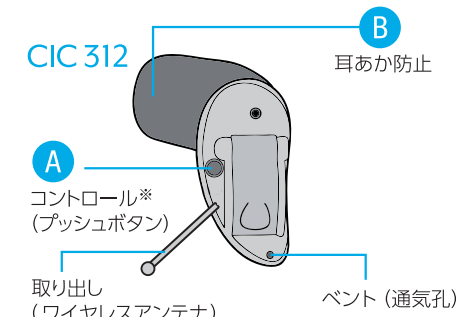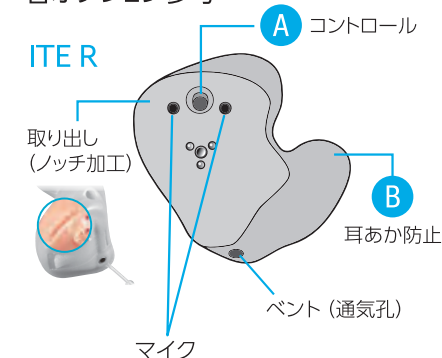

※標準仕様では、CIC 312/CICにコントロールは付きません。

指向性マイク	騒音下でノイズを抑え、会話により集中し易くなります。
テレコイル (※ITE Rのみ)	誘導ループシステムや電話の声を直接補聴器に伝えることができます。 手動で切り換える場合、別途プッシュボタンが必要になります。
A プッシュボタン コントロール (IIC除く)	ボリューム、メモリー切り替え、電源オンオフ、などができます。
デジタルボリューム	回転式ボリューム。(CIC312/CIC不可)
ホワイトワックスガード (標準)	撥水撥油性の耳あかガード。 お客様ご自身で交換できます。
B スプリング 耳あか防止	金属コイルで耳あかの侵入を防ぎます。 (IIC/CIC不可)
フタ式	音口にフタ加工をして耳あかの侵入を防ぎます。 ブラシなどで清掃します。(IIC不可)
ワックスキャップ	非常に小さいので 先端が細い場合でも取り付け可能です。

上記以外の選択肢もご用意しておりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
耳あな型補聴器は、器種やお客様のご要望、耳の形状によりカスタマイズされます。

耳かけ型パーツ類組み合わせ表

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。

RICタイプ

例) RIC 312

40、50、60ゲイン
レシーバー
各11,000円(税込)

40 スリム
50 ノーマル
60 パワー
※聴力によってレシーバーを選択
します。

埋込式
カスタムレシーバー
20,000円(非課税)

長さ(5種類):
1、2、3、4、5

保証期間 1年

※補聴器同時購入(10,000円 非課税)
がおすすめです。

オープンチップ
220円(税込)

サイズ(4種類):S、7、9、11mm

クローズチップ
220円(税込)

サイズ(4種類):S、7、9、11mm

①

シリコンモールド(左・右)

サイズ:XS、S、M

カスタム
イヤモールド

※ご注文時は、ご使用いただいでい
るレシーバーゲインをお伝えくだ
さい。

②

中空シリコンモールド(左・右)

サイズ:XS、S、M

③

ヘリックスモールド(左・右)

BTEタイプ

例) BTE13

イヤフック
330円(税込)

イヤフック
(小児用)

ジョイントチューブ
220円(税込)

耳栓 330円(税込)

サイズ(8種類):
LL、L、ML、M、MS、S、ソフトS、ソフトSS

スマート
チューブ
495円(税込)

左耳用(L)
右耳用(R)
長さ(8種類):
1、2、3、4、5、
3+、4+、5+

オープンチップ
220円(税込)

サイズ(4種類):S、7、9、11mm

クローズチップ
220円(税込)

サイズ(4種類):S、7、9、11mm

④

スマートチューブ
シリコンモールド
(左・右)

カスタム
イヤモールド

①②③④ 各2,200円(税込)

お客様の耳の形に合わせて作製する
特注の耳栓

カスタムイヤモールド

CIC ITC ITE スケルトン

耳かけ型補聴器でも"最高のフィット"を実現します

オーダーメイド補聴器の世界的な先駆者スターキーが耳かけ型補聴器性能
を担保するため、一人ひとりの耳の形にあったイヤモールドをご提供します。
(納期など詳細は取扱店にご相談ください。)

ハード 10,000円(非課税)
ソフト 12,000円(非課税)

カラーバリエーション

※RICはクリアのみ

クリア(標準) レッド ブルー ブラック パープル オレンジ グリーン

耳かけ型カラーバリエーション

RICタイプ

全7色(写真はRIC312)

①シャンパン ②ブロンズ ③エスプレッソ ④スターリング ⑤スレート ⑥ブラック ⑦ホワイト&
スターリング

BTEタイプ

全7色(写真はBTE13)

①シャンパン ②ブロンズ ③エスプレッソ ④スターリング ⑤スレート ⑥ブラック ⑦ホワイト&
スターリング

耳あな型カラーバリエーション

器 種	フェイスプレートカラー(外側)	シェルカラー(内側)	組み合わせ 標準カラー
IIC	ブラック ダークブラウン ベージュ	ブラック ベージュ レッド ブルー クリア	ブラック & ブラック
CIC	ブラック ココアブラウン ベージュ	ブラック ベージュ レッド ブルー クリア	ブラック & ブラック
CIC312	ブラック ベージュ	ブラック ベージュ レッド ブルー クリア	ブラック & ブラック
ITC R ITE R	ブラック ベージュ	ブラック ベージュ レッド ブルー クリア	ブラック & ブラック

36

37

性能一覧

データはJIS C 5512(2015)に基づいて測定されています。

スタイル		JIS						適応聴力	使用電池	電池寿命 (時間)	掲載 ページ
		誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB SPL)	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB SPL)		最大音響利得 (dB)						
			HFA-MASL	ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG				
耳あな型	IIC	—	110-115	106-109	40-50	36-46	軽～高	PR536 (10A)	70-75	18-26	
	CIC	—	110-120	106-115	40-60	36-53	軽～高	PR536 (10A)	65-75		
	CIC 312	—	110-120	106-113	40-60	36-53	軽～高	PR41 (312)	96 *		
	ITC R	—	110-120	106-114	40-60	36-54	軽～高	Li-Ion	～ 23		
	ITC R AP (アブソリュートパワー)	—	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23		
	ITE R	76-84	115-120	109-114	50-60	46-54	軽～高	Li-Ion	～ 23		
	ITE R AP (アブソリュートパワー)	92	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23		
耳かけ型	RIC 312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41 (312)	100-110	19-27	
	RIC 312 AP (アブソリュートパワー)	—	123-130	117-124	60-70	54-65	高～重	PR41 (312)	90-105		
	RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	～ 24		
	RIC R AP (アブソリュートパワー)	83-93	123-130	117-124	60-70	54-65	高～重	Li-Ion	～ 24		
	BTE 13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48 (13)	180		
	BTE R	92	130	124	70	62	軽～高	Li-Ion	～ 22		
	BTE 13 パワープラス	92	140	133	80	73	高～重	PR48 (13)	144		

●電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

*ワイヤレス機能非搭載モデルは112-136時間となります。

スターキー補聴器 あんしん保証制度

●テクノロジー	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
2400 エクスプレス 2000 プレミアム	紛失・破損保証 2年以内1回 まで		3年間 無償保証			
1600 スタンダード	紛失・破損保証 1年以内1回 まで	2年間 無償保証	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 14,000円	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 20,000円	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 30,000円	
1200 ベーシック 1000 エコノミー	紛失・破損保証 120日以内 1回まで	2年間 無償保証				
上記クラス 以外	1年間 無償保証	積算修理（上限金額無し）				
●その他 充電器 ワイヤレス アクセサリ	1年間 無償保証					

* オーダーメイド耳あな型のみ対応。

紛失・破損 保証	送付をお願いします	
	紛失の場合	過失による損傷の場合
	遺失届	破損した補聴器
無償修理 保証	お買い上げ日より、各保証期間内で発生する自然故障（取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態での故障）に対する修理を無償で行います。過失による損傷は対象外となります。	
有償修理	得々保証	お買い上げ日より、5年目までは期間中それぞれの上限金額を超える修理費用をいただきます。ただし、シェル再作費用は上限金額には含まれません。
	積算修理	積算修理は得々保証の対象外となります。 積算修理についての詳細は販売店までお問い合わせください。
耳あな型 シェル再作	形状が作製対象の 耳に適合しない場合 再作いたします。	
	無償 0円	
	無償保証期間内	
	お買い上げ日～120日以内*	121日～無償保証期間内
		無償保証 期間外
	無償 0円	+ 20,000円
		+ 25,000円

* イヤモールド（RIC埋込式レシーバー含む）は60日以内