

イヤピース

イヤチップ (7,9,11mmは購入時付属) 各1個 220円(税込)

オープンチップ

軽 ▶ 中



サイズ(4種類)
5mm, 7mm,
9mm, 11mm

クローズチップ

中 ▶ 高



サイズ(4種類)
5mm, 7mm,
9mm, 11mm

既成イヤモールド (別売) 各サイズ左右1セット 2,200円(税込)

シリコンモールド (左右)

軽 ▶ 高



サイズ(3種類)
XS, S, M

中空シリコンモールド (左右)

軽 ▶ 中



サイズ(3種類)
XS, S, M

ヘリックスモールド (左右)

軽 ▶ 中



フリーサイズ
(1種類)

スマートチューブシリコンモールド (左右)

軽 ▶ 中



フリーサイズ
(1種類)

BTE専用

性能比較表

性能	機能	S3	S2
音質コア	チャンネル/バンド数	16	12
	再現周波数	10KHz	8KHz
	ハウリング抑制		○
両耳機能	ユーザーコントロール連動	○	△*1
	会話強調	最大6dB	
快適	衝撃音抑制	最大6dB	
	風切音抑制	最大7dB	
	雑音抑制	機械音抑制	最大5dB
指向性	ソフト入力雑音抑制	★★	★
	指向性モード	追従型16ch	追従型12ch
カスタマイズ	ハンドル数	16	12
	メモリープログラム数		4
	ストリーミング専用プログラム		○
	耳鳴り治療音*2	16ch	13ch
ワイヤレスアクセサリ	各種リモコン対応		○
保証	修理保証		2年

*1: △ メモリー、アクセサリ起動・停止のみ

*2: 耳鳴り治療、および耳鳴り治療音搭載商品の使用に関しては、必ず耳鼻科の診断が必要です。



スターキー補聴器あんしん保証制度

1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
2年間無償	得々保証 14,000円	得々保証 20,000円	得々保証 30,000円	

無償修理保証 お買い上げ日より、上記の各保証期間内に発生した自然故障*に対する修理を無償で行います。
なお、過失による損傷は有償となります。

有償修理保証 [得々保証] 無償修理保証期間終了後は上記の各料金(一律)を上限とし、これを超える修理費用は請求いたしません(アンプ代を含む)。
※6年目以降は部品有償修理(部品代+技術基本料)になります。

*取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合

性能一覧

スタイル	JIS					適応聴力	使用電池	電池寿命
	誘導コイル入力の最大感度 (dB SPL)	90dB入力最大出力音圧レベル (dB)		最大音響利得 (dB)				
	HFA-MASL	ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-F0G			
RIC	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽~高	PR41 (312)	100-110
RIC AP	—	123-130	117-124	60-70	54-65	高~重	PR41 (312)	90-105
BTE	92	130	122	70	62	軽~高	PR48 (13)	180

●データはJIS C 5512(2015)に基づいて測定されています。
●電池寿命は基準の状態での測定値であり、調整や使用状況により異なります。
*ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkeyjp.com

0120-045-190

フリーダイヤル

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027



スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ

※補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。
しかし、装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
◎本カタログに掲載されている補聴器本体は非課税です。
◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。



MD84856/ISO13485

BROC179-00-JJ-JP JPYBR-179

2022年5月作成

スターキー 耳かけ型 (RIC・BTE)
モデルS カタログ



Model S

[モデルS]



シンプルに良い聴こえを求めるなら。

Model S

[モデルS]



購入後の
安心保証期間
2年

カラーバリエーション [全4種] ※写真はRIC



製品価格

S3	両耳	196,000円	片耳	98,000円
S2	両耳	156,000円	片耳	78,000円

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。
■ 医療機器認証番号 231ADBZX00014000

一般的レシーバー分離型

RIC

軽 ▶ 重



● スターリング


IP58
防水・防塵

シーソースイッチ

AP選択可(有料)※

埋込式
レシーバー
有料オプション

312

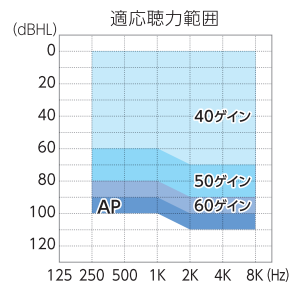

※：埋込式カスタムレシーバー (AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)が必要となります。(単品購入の場合:非課税 20,000円)

扱いやすく電池長持ち

BTE

軽 ▶ 高




● スターリング

IP68
防水・防塵

シーソースイッチ

テレコイル

13

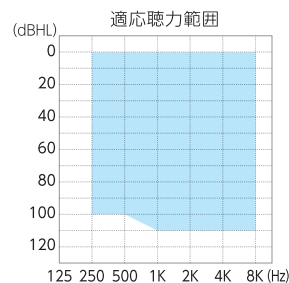

*1：国際保護等級IP68・IP58取得。日常生活防水(完全防水とは異なります)。

快適

もっと楽に、もっとシンプルに

聞き取りの負担を減らす確かな性能

会話強調

独自の技術で言葉と騒音を高速で分析し、声と声の間にある雑音さえも抑制します。



衝撃音抑制

突発的に響く大きな音を抑制し、聞き取りの快適さを向上させます。



追従型指向性

雑音の方向を自動的に避けて言葉に自動フォーカス。



便利

リモコン対応・外部機器接続

ワイヤレスアクセサリを利用して、聞き取りやすさ、使い勝手がさらに向上。

TVストリーマー

33,000円(税込)


周りと同じ音量でテレビを楽しむ



Thriveリモコン

22,000円(税込)

手元でカンタン調整

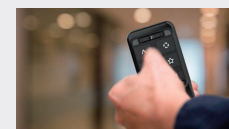

● 上記以外のワイヤレスアクセサリもごございます。

選べる

RICもBTEも選べる

小型のRIC、扱いやすいBTEの2種類2つの価格帯

