

Made for Apple/バッジは、アクセサリが特にバッジが示すApple製品に接続するように設計されており、Appleの性能基準を満たすことが開発者によって確認されていることを意味します。Appleは、このデバイスの操作、安全、規制基準への適合性について責任を負いません。iPad、iPhone、またはiPadでこのアクセサリを使用すると、無線性能に影響が出る可能性があることに注意してください。Apple、Appleのロゴ、Apple TV、Apple Watch、iPad、iPhone、iPod、iPodtouchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App Store、Siriは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。GoogleはGoogle LLCの商標です。Google PlayおよびAndroidはGoogle Inc.の商標です。本書に記載されているその他の製品名および会社名はそれぞれの会社の商標である場合があります。

Made for
 iPhone | iPad | iPod

Download on the
 App Store

GET IT ON
 Google play

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
 Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkeyjp.com

 0120-045-190

フリーダイヤル

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

ブログ公開中!



Hear better. Live better.

スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ

※補聴器は適切なフィッティング(調整)により、その効果が発揮されます。しかし、装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
 ◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
 ◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。



BROC0186-00-JJ-JP JPYBR-186

2024年3月作成
 JMY50-127

2024.3

スターキー

Genesis AI (ジェネシスエーアイ) カタログ



“瞬間快適” AI補聴器



GENESIS^{AI}
 [ジェネシス]
 Neuroプロセッサ



1日中快適、365日快適。
 どんな場所でも、快適に
 「きこえる」喜びを。



“瞬間快適” AI補聴器。

どんな場所でも、快適に「きこえる」喜びを。

GENESIS^{AI}

[ジェネシス]

Neuroプロセッサー

聞き心地の良さの
満足度
(2023年スターキー調べ)

93%

静かな場所での
聴き取り

84%

騒がしい中での
聴き取り

システムメモリ

トランジスタ数

6倍

TRANSISTOR

スピード

4倍

PROCESSING

10倍

MEMORY

+

電池消費量



25%削減

充電式補聴器

最大 2日間

連続使用可能



器種により若干異なります。

※従来自社製品比。 3

着ていることを忘れるような、快適な装着感。

新しいRICデザイン

人間工学の粋を極めた耳のフィット感。綿密な研究から作られた新しいRICデザイン。耳にやさしい「V字型」ナチュラルフィットで24時間、快適さと優れた耐久性を実現。

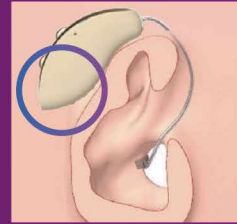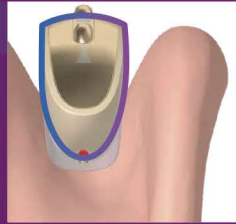

国際保護等級IP68を超える防水性能。

Pro8ハイドラシールド™搭載



BEYOND IP 68 テスト





- アンプ**
より堅牢なシーリング加工
- マイク**
最終層メッシュバリア
マイクカバー交換不要
- レシーバー**
ケーブル*補強
より細く、しなやかに
- 音口ポート**
異物侵入を防ぐ再設計
- 電池格納部**
完全密閉で湿気侵入防止
- 充電接点**
湿気を弾くシリコンシーリング


国際保護等級 IP68とは

【防塵等級 6】

【防水等級 8】

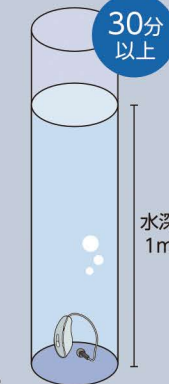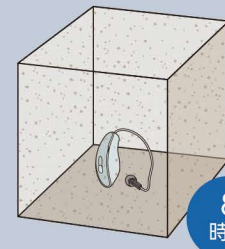


これらテストの時間経過後、修理が必要なダメージが発生せず使用可能な状態。

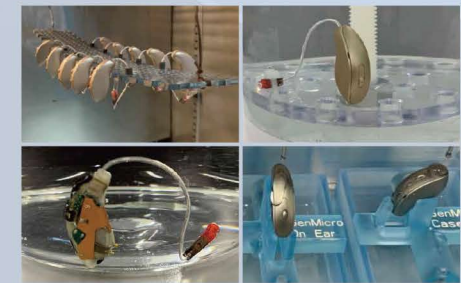

従来品

Pro8ハイドラシールド™

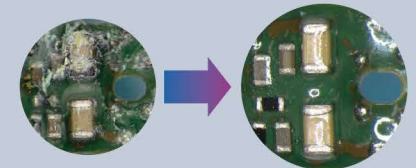


各パーツ：IP68基準を超えた試験をクリアした内外コーティング
筐体設計：重なり合うオーバーラップ設計でタイトなシーリング


*防弾チョッキなどに使用される強靱で柔軟な素材

人間の聴覚を模倣した音質で、「きこえる」世界を再現。

音がただ「きこえる」というだけでなく、「意識する」「集中する」「遮断する」「選別する」といった、私たちが無意識に使っている“聴覚機能”を人工知能(AI)が自動調整し、あなたをサポートします。

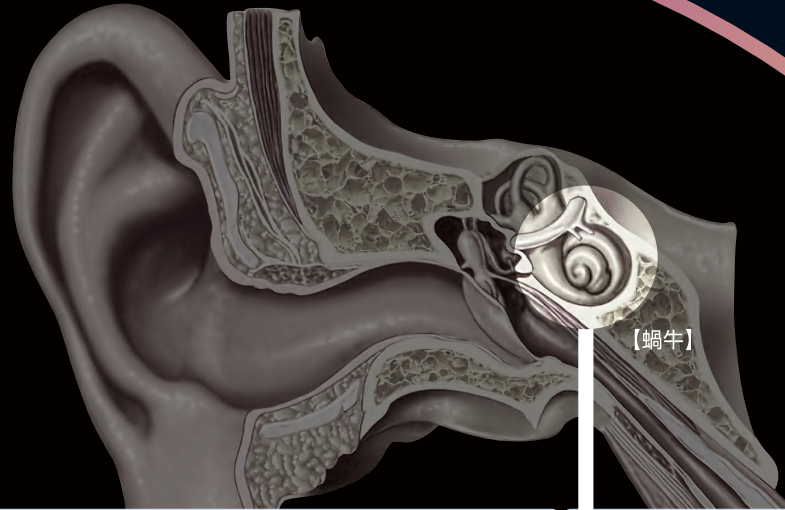


AI 8000万回 (1時間) 限りなくありのままの音を再現
ダイナミックレンジ118dBに拡張

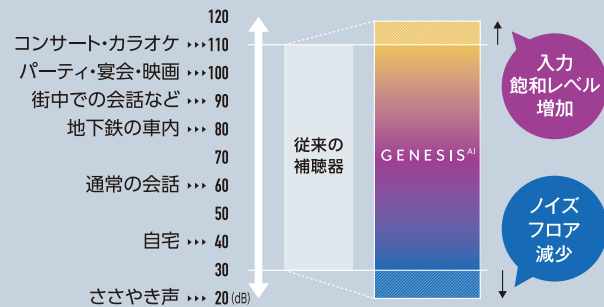


本来、人間がもつダイナミックレンジ120dBに近づけることで、音の歪みを抑え、より自然な音を実現しました。ノイズフロアも従来比40%抑制しています。

AI 8000万回 (1時間) 「聴き取りやすさ」と「聞き心地」を両立
高速&低速コンプレッサー同時処理

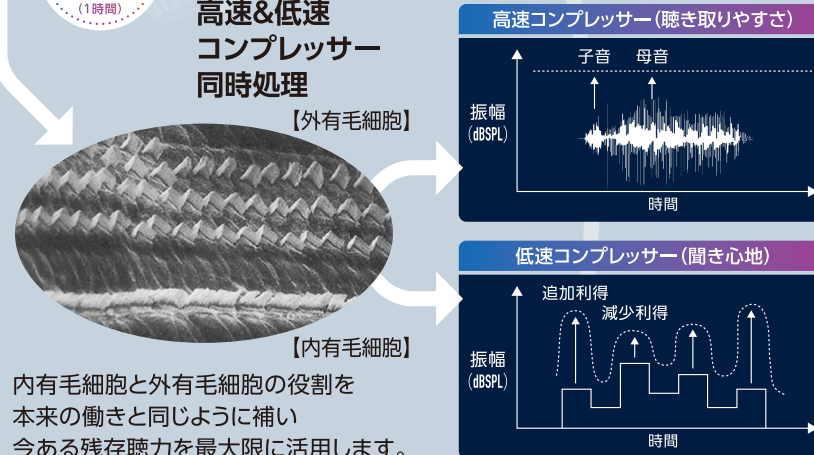

内有毛細胞と外有毛細胞の役割を本来の働きと同じように補い今ある残存聴力を最大限に活用します。

AI 8000万回 (1時間) ことばの聴き取りがもっと楽に
新しい音声処理処方式
低入力音の平均利得比較

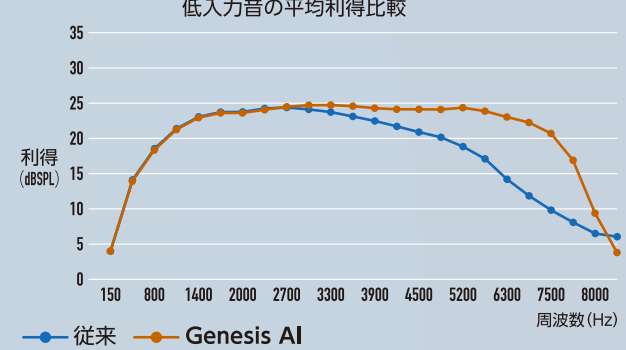


「サ行」に代表される日本語の聴き取りに重要な子音成分を補うために3,000Hz以上の音を従来よりも大きく増幅します。

さらに進化したエッジモード^{プラス} **もっと気軽に、誰でも手軽に、“瞬間快適”な音質をお届け。**

従来の補聴器

あなたの聴きたい音とそうでない音を
区別することは非常に困難でした。

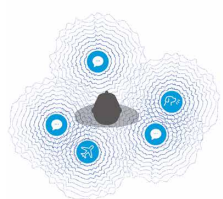

音質を変えたい時ワンタッチするだけ

AIが快適な
音を瞬間調整



GENESIS^{AI} & エッジモード^{プラス}

聴き取りが難しい環境でもDNN(ディープ
ニューラルネットワーク)を取り入れた人工
知能が音声に焦点を当てつつ、音質を
最適化します。



補聴器業界初のAIによる瞬間快適機能を採用

もっと聞こえやすくしたい

従来

- 不満点を記録する ● 調整の予約をする
- 店舗へ訪問する ● 現状の不満を伝える



エッジモード^{プラス}

全
クラス
リモコンor
スマホをタッチ

24
クラス
エッジモード全自動化
(補聴器本体での操作)

調整に訪問する回数を
20%削減*

リアルタイム
+
プロ品質



フィッティング調整

*2022年2月
スターキージャパン調べ

ALL New ✨ 瞬間快適エッジモード^{プラス} の“新”機能

3モード パターン選択

最適化

会話の強調

雑音の抑制

お気に入りの
エッジモード^{プラス}
音質の保存も可能

リモコンでも
エッジモード^{プラス}
(最適化)の
利用が可能

操作
ツール

専用スマホアプリ
My Starkey (無料)



使い方はこちら



全クラス対応
StarLinkリモコン
(別売) **New**



☆ボタンで
エッジモード^{プラス}
(最適化)を起動
できます

補聴器



クラス

24*

3モード

1モード
(最適化)

1モード(最適化)
ダブルタップ
またはボタン

20

3モード

1モード
(最適化)

×

16

1モード
(最適化)

1モード
(最適化)

×

★ GenesisAI24のみ操作不要の全自動エッジモード設定(PC)が可能。

メンテナンス機器



延長保証



をセットにして、より快適・安心な補聴器生活をご提案します



補聴器購入時限定特別プラン

あんしんメンテナンスパックとは



充電式 UV 除菌乾燥機



無償修理保証
紛失・破損保証
耳あな型シェルの
無償再作保証

プラス1年延長保証

補聴器ご購入時に選択できるメンテナンス機器と延長保証をセットにした、お得なプランです

通常価格

除菌乾燥機 (ドライキャップUV3) 19,800円(税込)

延長保証 (スターキーケア) 両耳 40,000円(非課税) 片耳 20,000円(非課税)

価格

補聴器価格にプラス

両耳 **36,800円** 片耳 **24,800円**

ご加入条件

- 補聴器本体のご購入時のみ加入できます。
- 補聴器を両耳で購入した場合、片耳のみ加入することはできません。
- 当社に帰責事由があった場合を除き、解約・返金不可となります。

もしもに備えてさらに安心の保証を！

プラス1年延長保証

スターキーケア

【通常価格 両耳】40,000円 (非課税)

【通常価格 片耳】20,000円 (非課税)

クラス	120日	1年	2年	3年	4年	5年
24 / 20 エクスクルーシブ プレミアム	無償修理保証				+1年延長	
	紛失・破損保証		+1年延長			
	耳あな型シェル再作保証		+1年延長			
16 スタンダード	無償修理保証			+1年延長		
	紛失・破損保証		+1年延長	得々保証* 上限20,000円	得々保証* 上限30,000円	得々保証* 上限40,000円
	耳あな型シェル再作保証		+1年延長			

*無償修理保証期間終了後、5年目までは各料金(一律)を上限として、これを超える修理費用は請求しません。

無償修理保証 最大4年間

お買い上げ日より、表記の各保証期間内に発生した自然故障に対する修理を無償で行います(充電電池交換含む)。

紛失・破損保証 最大3年間

お買い上げ日より表記の各保証期間内で、紛失・盗難・天災・自損事故にあった場合、1回のみ無償再作・同等品交換します。

耳あな型シェル再作保証 最大2年間

耳あな型補聴器をご購入いただいた際、形状がお客様の耳の形状に合わない場合、再度無償でシェルを作成します。

補聴器の管理がラクになる！

充電式 UV 除菌乾燥機

ドライキャップ UV3®

通常価格 19,800円(税込)



- ✓ コードレスで使いやすい!
- ✓ スマホなど他のアイテムも除菌可能!

StarLink アクセサリー



万一、充電が切れても安心

急速充電対応

10分充電で
3時間
使用可能

チャージャーケース

耳あな型用・耳かけ型用

バッテリー非搭載

17,600円(税込)

保証期間1年

保存ケースにもなる充電器

サイズ:H56×W92×D63mm

LEDランプで補聴器が充電されたことをお知らせ、充電器から取り外すと補聴器に自動的に電源が入ります。

	耳あな型用	耳かけ型用	
器種			
	ITC R ITE R	mRIC R	RIC RT
充電時間	3.5時間		
最長使用時間	42時間	41時間	51時間

StarLinkリモコン

22,000円(税込)

保証期間1年

手元でカンタン調整

ボタンを押すだけでメモリと音量の変更や、お気に入りモードへの切り替えができます。



ミニマイク

23,100円(税込)

保証期間1年

聴きたい人の声を楽に聞く

ボタン1つだけのシンプル設計で話している人の衣服にクリップで留めて使用します。操作性の簡単なミニマイクで、騒がしい環境でも1対1の会話を楽しめます。



最大20メートル(外部マイク)

Bluetooth



リモートマイク^{プラス}

40,700円(税込)

保証期間1年

習い事や教室で、話し手が遠い場所で

Bluetooth、テレコイル、FM、音声入力の4つの異なる入力音源から多機能ストリーミング。騒がしい環境でも聴きたい人の声を楽に聞けます。指向性マイクも搭載。



最大20メートル(外部マイク)

Bluetooth



スマホと接続してハンズフリー通話ができます

※別売オーディオ入力ケーブルでアナログ入力もサポート

1,320円(税込)

テーブルマイク

57,200円(税込)

保証期間1年

会議やディスカッションに参加

マスク、ビニール越しの会話や会議、グループ会話をより楽しみたい方におすすめ。8個の独立した指向性内蔵マイクが音声をビームのように追従、補聴器にストリーミングします。付属品：専用アナログ入力ケーブル、モニターイヤホン



Bluetooth



TVストリーマー

35,200円(税込)

保証期間1年

周りと同じ音量でテレビを楽しめる

テレビまたは他の電子機器から補聴器に安定した音声を直接ストリーミング。光デジタルとアナログ接続の入力信号をサポートします。



Bluetooth



自分とも家族とももっとつながる スターキーのアプリ



スマートフォンの
カメラでかざして
あなたのスマホ
をチェック



スマートフォンとの連動性能

あなたの自由を叶えるアプリ体験



エッジモード+

ワンタッチ操作で補聴器内蔵のAIが音質調整してくれます。



リモコン機能

音楽やプログラムの変更など、手で簡単に操作できます。



補聴器を探す

補聴器を見失ってしまった時、探し当てることができます。



健康モニタリング

歩数や運動量、社会交流を計測してあなたのウェルビーイングを支えます。



もっと電話で話したい

ハンズフリーで通話を楽しめます。
※ iPhone11以降 (iOS15.1以降)



転倒通知

急に倒れてもすぐに家族や友人にお知らせできます。

家族用みまもりアプリ



リアルタイムに家族と つながる



ご家族

健康状態を
モニタリング



補聴器ユーザー

離れて生活していても、
ユーザーの心身の健康状態を確認できます。



My Starkey
Starkey Laboratories

※ ご使用前にお使いのiOSデバイス (iPhone, iPad, iPod touch等) のソフトウェアバージョンが最新 (iOS15以上) になっていることを確認してください。

マイ スターキー

My Starkey

アプリのダウンロード **無料**

アプリストアで「スターキー」と検索もしくは右のQRコードからダウンロードください。



スマートフォンとの互換性の詳細は、右のQRコードもしくは、
www.starkey.jp.com/hearing-aids/apps/compatibility をご参照ください。
スターキーホームページ www.starkey.jp.com 「対応スマホ一覧」からも
ご確認いただけます。(Androidは一部の端末のみ対応)



ヒア シェア

HEARShare

アプリのダウンロード **無料**

※ iOS12以上、AndroidOS6.0以上でご利用できます。

アプリストアで「スターキー」と検索もしくは右のQRコードから
ダウンロードください。



クラス別使用環境

3つのパフォーマンスクラス。

上位クラスの器種は、チャンネル数が多く、騒音抑制や会話強調など、多彩な機能が搭載され、より賑やかな場所でも聞き取りやすくなります。



スマホでカンタン、ハンズフリー通話*
ワイヤレスアクセサリ対応 *iOSのみ対応

ご利用環境や用途に合わせたクラスをお選びください。

よく訪れる場所はどこですか？

「誰と」「どんなシチュエーション」での会話が楽しみですか？



音質不満を感じる時こそAIチャンス
エッジモード+が瞬でその場に合わせた最適な音質を提供。

使用環境 クラス	チャンネル (調整バンドル数) 再現周波数	保証期間	自宅 テレビ	二人 での会話	食事	屋外	音楽・BGM	グループ での会話	レストラン	旅行 ショッピング	居酒屋 パーティー	車・電車	ライブ (観劇)	大勢の集まり
エクスクルーシブ 24	24ch 10kHz	3年	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
プレミアム 20	20ch 10kHz	3年	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
スタンダード 16	16ch 10kHz	2年	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

静か

2~3人程度

にぎやか

~5人程度

とてもにぎやか

~10人程度

複雑に変化

聞き取りが難しい

テレビ視聴には、TVストリーマーやテーブルマイクが便利です。 > 13 ページ



特に会議などではテーブルマイクでサポートできます。 > 13 ページ



スターキー ジェネシス エーアイ

GENESIS^{AI}
[ジェネシス]

耳かけ型

24・20

16

購入後の
安心保証期間 **3年**
紛失保証 **2年付***1

購入後の
安心保証期間 **2年**
紛失保証 **1年付***1



軽度～重度難聴

充電式 充電

mRIC R

プッシュボタン

RIC RT

シーソースイッチ
テレコイル



シルバー

連続使用時間: **41時間**
(3.5時間ストリーミングで33時間)



シルバー

連続使用時間: **51時間**
(3.5時間ストリーミングで46時間)

電池式

RIC 312

プッシュボタン

312




ベージュ

電池寿命
80-96時間

New RICレシーバー

- ・より細くなって目立ちにくい
- ・より柔らかくて耳になじみやすい
- ・防水性能がさらに強化

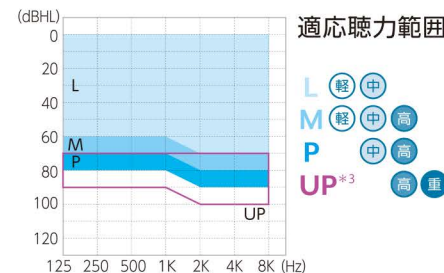

CROS 片方の耳が聞こえない方へ



• RIC RT CROS **充電** • RIC 312 CROS **312**
¥110,000 (税込)

全7色

※写真はmRIC Rです



クラス	修理保証	紛失保証*1	充電式価格 (充電器 17,600円 (税込) 含む)	電池式価格	リモコン
24	3年	2年1回	両耳 1,357,600円 片耳 687,600円	両耳 1,340,000円 片耳 670,000円	<p>StarLink リモコン 22,000円 (税込)</p>
20	3年	2年1回	両耳 957,600円 片耳 487,600円	両耳 940,000円 片耳 470,000円	
16	2年	1年1回	両耳 637,600円 片耳 327,600円	両耳 620,000円 片耳 310,000円	



補聴器購入時限定特別プラン

両耳 **¥36,800**
片耳 **¥24,800**

※詳しくは10,11ページをご覧ください

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2: 国際保護等級 IP68 取得。完全防水とは異なります。

管理医療機器認証番号: 305ADBZX00099000

*3 UPレシーバーは耳型と別途10,000円(非課税)をいただきます。(補聴器と同時にご注文いただいたレシーバーの保証期間は補聴器に準じます。)

CROSは電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入前に必ず専門医にご相談ください。

CROSはワイヤレス通信を常時使用するため電池を消耗します。

スターキー ジェネシス エーアイ

GENESIS^{AI}

[ジェネシス]

耳あな型

24・20


16

購入後の
安心保証期間 **3年**

購入後の
安心保証期間 **2年**

紛失保証 **2年付***1

紛失保証 **1年付***1

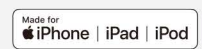

軽度～重度難聴

充電式 充電

ITC R

プッシュボタン

ブラック&ブラック

連続使用時間:**42時間**
(3.5時間ストリーミングで36時間)

ITE R

プッシュボタン
テレコイル選択可

ブラック&ブラック

連続使用時間:**42時間**
(3.5時間ストリーミングで36時間)

全10色 ※写真はITC Rです

ブラック & ブラック	ベージュ & ブラック	レッド & ブラック	ブルー & ブラック	クリア & ブラック
ベージュ & ベージュ	ブラック & ベージュ	レッド & ベージュ	ブルー & ベージュ	クリア & ベージュ

電池式

CIC 312

プッシュボタン選択可

ブラック&ブラック

電池寿命
112-160時間

CIC T²

プッシュボタン選択可

ブラック&ブラック

電池寿命
80-112時間

IIC T²

プッシュボタン選択可

ブラック&ブラック

電池寿命
80-112時間

シェル (中側) &	ブラック	ベージュ	レッド	ブルー	クリア
	CIC 312 全10色		CIC 全15色		IIC 全15色
フェイスプレート (外側)	ブラック	ベージュ	ブラック	ココアブラウン	ベージュ
	ブラック	ダークブラウン	ベージュ	ブラック	ベージュ

クラス	修理保証	紛失保証*1	充電式価格 (充電器 17,600円 (税込) 含む)	電池式価格	リモコン	<p>あんしんメンテナンスパック</p> <p>補聴器購入時限定特別プラン</p> <p>両耳 ¥36,800</p> <p>片耳 ¥24,800</p> <p>※詳しくは10,11ページをご覧ください</p>
24	3年	2年1回	両耳 1,377,600円 片耳 697,600円	両耳 1,360,000円 片耳 680,000円	<p>StarLink リモコン 22,000円 (税込)</p>	
20	3年	2年1回	両耳 977,600円 片耳 497,600円	両耳 960,000円 片耳 480,000円		
16	2年	1年1回	両耳 657,600円 片耳 337,600円	両耳 640,000円 片耳 320,000円		

*1: 期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2: 国際保護等級 IP68 取得。完全防水とは異なります。

管理医療機器認証番号: 305ADBZX00100000

*3: T2リモートアプリ(プッシュトーンで音量、メモリー操作)対応

CIC,IICは非ワイヤレスモデルの為、センサー&AI機能は利用できません。

クラス別機能・保証比較表

分類	機能	機能説明	24	20	16
音質コア	チャンネル/バンド数	音の帯域を複数に分割することで、よりありのままのサウンドを再現します。	24	20	16
	音響分析バンド数	音環境を分析するためのバンド数です。	64	60	56
	フィッティング周波数帯域(kHz)	高音域まで再現することで音質が向上します。	10	10	10
	加算型コンプレッサー NEW	高速&低速の2種類の同時音声圧縮処理により、聴き取りやすさと聞き心地を両立。	○	○	○
	ハウリング抑制	定評のある独自のハウリング抑制システムで不快なピーピー音から解放します。	○	○	○
	参照型OCL	音量感とともに自声の違和感を改善し、より自然な音質を届ける新しい出力圧縮制限。	○	○	○
*1 両耳機能	空間スピーチ*2 エンハンス	賑やかな場所で正面の話し相手との会話に集中できます。	★★★★ ★★	★★★★	★★
	両耳受話	受話器を補聴器に近づけると両耳で話し相手の声を聞くことができます。	○	○	○
	ユーザーコントロール 連動	片方の補聴器への操作で、左右両方の補聴器を同時に調節できます。	○	○	○
快適	オンデマンド*1 AI調整 NEW	エッジモード+でその場でプロ品質の瞬間調整をすることができます。	★★★★ ★★	★★★★	★★
	子音強調 NEW	ささやき声だと聞き取りにくい「サ行」や「カ行」の音の成分を極立たせて聞こえやすくします。	★★★★ ★★	★★★★	★★
	音楽専用処理	楽しむための独自の処方式で、ありのままの自然なサウンドを届けます。	○	○	○
	会話強調機能 (最大dB)	独自の技術で言葉と騒音を高速で分析し、声と声の間にある雑音さえも抑制します。	22dB	10dB	8dB
	衝撃音抑制 (最大dB)	突発的に響く大きな音を抑制し、聞き取りの快適さを向上させます。	15dB	9dB	6dB
	周波数変換	聞き取りづらい高周波数帯域にある音を聞き取りやすい音域に複製できます。	○	○	○

分類	機能	機能説明	24	20	16
騒音抑制	風切り音抑制 (最大dB)	風切り音を効果的に抑制。屋外でも聞き取りやすい。	35dB	19dB	10dB
	機械音抑制 (最大dB)	ミキサーや掃除機など大きな定常的な音がある場合、抑制します。	22dB	12dB	7dB
	ソフト入力雑音抑制	冷蔵庫やエアコンの小さくわずらわしい音を抑えることで、言葉をより聞き易くします。	★★★★ ★★	★★★★	★★
*3 指向性	指向性モード	言葉の聞き取りを向上するために、会話と雑音を選び分けます。	追従型 24ch	追従型 20ch	追従型 16ch
	モーションセンサー 指向性 NEW	センサーと連動して指向性を最適化します。	○ (フル)	○	—
利便性	スマートフォンとの 連携	スマートフォンの音声を補聴器にストリーミング。アプリで操作ができます。	○	○	○
	ハンズフリー通話	iPhone11以降(iOS15.1以降)をお使いの場合、通話時に補聴器のマイクで自声を拾います。	○	○	○
	遠隔オンライン調整*4	ご自宅に居ながら店舗スタッフが補聴器を遠隔調整する機能です。(アプリ要)	○	○	○
	ファームウェア 更新 NEW	店舗にいかなくてもアプリで簡単に性能更新。	○	○	○
*1 通信機器	スマートフォン	スマートフォンと接続して通話、音楽ストリーミングができます。	○	○	○
	ワイヤレス アクセサリ	ワイヤレスアクセサリを利用して、聞き取りやすさ、使い勝手が向上します。	○	○	○
	CROSシステム*2	CROS送信機のマイクで音を捉えて、反対側の補聴器に音声を届けます。	○	○	○
保証	修理保証	無償にて修理対応を行います。*3 (年数)	3年	3年	2年
	紛失保証	紛失または過失による損傷にあった場合、無償にて再作・同等品交換します。	2年1回	2年1回	1年1回

*1:非ワイヤレスモデルの場合、使用できません。

*2:RIC RT, RIC312のみ対応。

*3:IIC, CIC, CIC312には指向性は対応しません。

*4:一部の店舗ではご利用できない場合があります。

クラス別 センサー&AI (ヘルサブル)*1機能比較

分類	機能	どのような機能?	どのような時に利用?	Genesis AI		
				24	20	16
きこえ ヒ어링アップフォーメンズ	エッジモード +	いつでも、どこでも、あなたが欲しいと思った時に、AIが音質を瞬時に調整する	いつ・どんな場所でも、聴き取りに我慢したくないときに			
	瞬間快適モード (アプリ) NEW	エッジモードの音質を最大3つのモードから選べて保存できる	簡単に好みの音質へ変更したい/好みの音質を保存したい			
	ボイスコマンド	タップしてつぶやくだけで補聴器を音声操作できる	時間をかけずに操作したい			
	タップコントロール	トントンするだけでストリーミングの開始と停止ができる				
	ボイスAI*2	利用すればするほど、AIが音声を学習する遠隔マイク(条件あり)	ささやき声を聞き逃したくないときに		—	—
	マスクモード	マスク越しの声を聴き取りやすくする	病院やコンビニのレジでの会話など聞き逃したくないときに			
	自動オン/オフ	静止状態が15分続くと自動的に省エネモード	補聴器を置きっぱなしにしてしまったとき			
	セルフチェック	補聴器の内部の状態をスマホが診断する	突然聞こえなくなっても、どうしたらいいかはスマホでチェック			
	TeleHear オンライン調整*3	補聴器をオンラインで調整できる	自宅に居ながら、補聴器のことを相談したい			
ヘルスケア 健康とウェルネス	身体の健康	運動量を毎日ゲーム感覚で管理できる	心身ともに健康的な生活を送りたい			
	脳の健康	脳の活性につながる行動を無理なく管理できる				
	転倒通知	転んだ時にスマホから登録先にメッセージを送信する	万が一のときでも家族が安心できる			
	ヒアシェア (みまもりアプリ)	離れた場所から補聴器の使用状況をモニタリング	家族が離れた場所にいってもあなたを見守ってくれる			
情報アシスタント AIアシスタント	補聴器を探す	スマホを使って補聴器を探す	補聴器をなくしたとき			
	リマインド通知	スケジュールを補聴器が通知する	薬の飲み忘れなどを避けたい			
	文字起こし	会話相手の言葉を文字に起こしてくれる	会話をメモに残したい			—
	音声翻訳	71種類の言語から聞きたい言葉をその場で翻訳する	海外旅行や語学学習で慌てる必要なし		—	—

*1:テクノロジーによる健康状態のトラッキングや情報サポートのための独自機能。
 *2:iOS利用、両耳装着、250-500Hzで50dBHL以上の聴力損失があることが動作条件となります。(2024年1月現在)
 *3:TeleHearオンライン調整は一部の店舗ではご利用できない場合があります。
 *非ワイヤレスモデル(IIC・CIC・CIC312で選択可能)の場合、センサー&AI機能は利用できません。

*4:操作には専用アプリが必要です。

... 補聴器単体で操作できる機能です
 (2024年1月現在)

スタイル	JIS C 5512:2015						適応聴力	使用電池	電池寿命 (時間)	掲載 ページ
	誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB SPL)	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB SPL)		最大音響利得 (dB)						
		HFA-MASL	ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG				
耳かけ型	RIC 312	-	107-120	101-116	43-60	36-56	軽～高	312	80-96	19
	RIC 312 UP (埋込式カスタムレシーバーのみ)	-	125	122	67	64	高～重	312	80-96	19
	mRIC R	-	107-119	101-115	42-60	35-55	軽～高	Li-Ion	~41	18
	mRIC R UP (埋込式カスタムレシーバーのみ)	-	125	122	66	63	高～重	Li-Ion	~41	18
	RIC RT	67-79-86	107-120	102-117	42-60	36-56	軽～高	Li-Ion	~51	18
	RIC RT UP (埋込式カスタムレシーバーのみ)	94	125	122	67	65	高～重	Li-Ion	~51	18
耳あな型	IIC	-	110-115	105-110	41-49	36-46	軽～高	10A	80-112	21
	CIC	-	110-118	105-114	43-61	37-54	軽～高	10A	80-112	21
	CIC 312	-	109-117	104-113	42-60	36-54	軽～高	312	112-128*	21
	ITC R	-	110-117	105-113	40-59	36-55	軽～高	Li-Ion	~42	20
	ITC R UP	-	125	122	68	63	高～重	Li-Ion	~42	20
	ITE R	74-83	114-117	109-113	51-58	46-54	軽～高	Li-Ion	~42	20
	ITE R UP	92	125	121	67	63	高～重	Li-Ion	~42	20

●電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

*ワイヤレス機能非搭載モデルは112-160時間となります。

スターキー補聴器 あんしん保証制度

●テクノロジー	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
24 エクスクルーシブ	紛失・破損保証 2年以内 1回まで		3年間 無償保証	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 30,000円	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 40,000円	積算修理 (上限金額無し)
20 プレミアム	紛失・破損保証 2年以内 1回まで		3年間 無償保証	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 30,000円	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 40,000円	積算修理 (上限金額無し)
16 スタンダード	紛失・破損保証 1年以内 1回まで		2年間 無償保証	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 20,000円	得々保証 充電池/ アンプ代込み 上限 40,000円	積算修理 (上限金額無し)



UV除菌乾燥機 + プラス1年延長保証 をセットにして、より快適・安心な補聴器生活をご提案します
詳細は10、11ページを参照ください

両耳 **36,800円** 片耳 **24,800円**

ご加入条件

- 補聴器本体のご購入時のみ加入できます。
- 補聴器を両耳で購入した場合、片耳のみ加入することはできません。
- 当社に帰責事由があった場合を除き、解約・返金不可となります。

紛失・破損保証	送付をお願いします	
	紛失の場合 遺失届	過失による損傷の場合 破損した補聴器
無償修理保証	お買い上げ日より、各保証期間内で発生する自然故障 (取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態での故障) に対する修理を無償で行います。過失による損傷は対象外となります。	
有償修理	得々保証	お買い上げ日より、5年目までは期間中それぞれの上限金額を超える修理費用をいただきません。ただし、シェル再作費用は上限金額には含まれません。
	積算修理	積算修理は得々保証の対象外となります。積算修理についての詳細は販売店までお問い合わせください。
耳あな型 シェル再作	形状が作製対象の耳に合わない場合 再作いたします。	お買い上げ日～1年以内 ※ 無償 0円
		1年～ +25,000円

※イヤモールド (RIC埋込式レシーバー含む) は60日以内