



補聴器の管理がラクになる！

充電式 UV 除菌乾燥機

ドライキャップ UV3®

19,800円 (税込)



アイエフデザイン
アワード受賞



✓ 置き場所を選ばない！

充電後はコードレスで使えるので、
コンセントの無い場所で手軽に使えます。
旅行や出張にも便利です。

✓ 充電式補聴器に最適！

乾燥剤が不要で、
補聴器を充電しながら、
乾燥と除菌が同時にできます。

使い分けできる「2つの運転モード」 ボタンを1回押すだけの簡単操作



一日の終わりにセットするだけ

乾燥 & 除菌 モード

120 分間

全自動で乾燥・除菌完了後に自動停止
します。動作中の音も静かです。

🔄 1回の充電で 最大5回 使用可能

帰宅後は清潔に

除菌 モード

2 分間

わずか2分で気軽に除菌できます。
完了後に自動停止します。

🔄 1回の充電で 最大60回 使用可能

ユニークな構造で、普段使いのアイテムも除菌できます。

スマートフォンやマスクなどの日常的に
使用するアイテムも、上から被せるだけで
除菌できるので便利です。



最大 99.9% 除菌



乾燥


ターボファンで効率的に優しく乾燥します。

熱を利用しない高速ファン(7,000回転/毎分)で空気を補聴器に直接送り込み、風力のみで優しく乾燥させます。湿った空気は側面の開口部を通じて排出されます。

ダブル除菌

UV-C & LEDブルーライトが雑菌を強力に除去します。

除菌効果の高い253.7nm波長帯のUV-C ライトと、465nm波長帯のLEDブルーライトで雑菌を最大99.9%除菌します。^{*} 乾燥 & 除菌モードでは、乾燥開始2分間と乾燥終了後2分間の2回除菌が行われます。

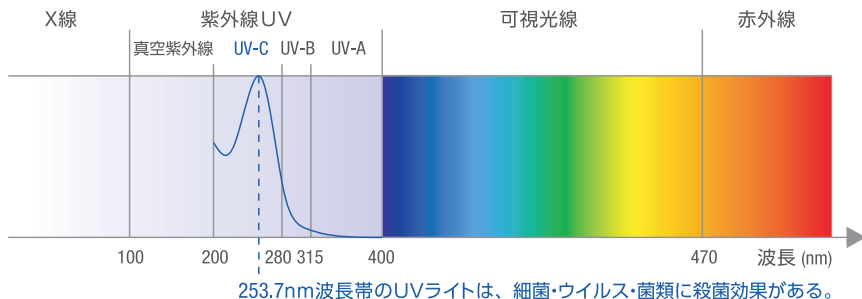

※第3者機関からテスト済み。(The Hong Kong Standards and Testing Centre Limited)

3つの安心

1 センサー搭載

UVライトから目を保護するために、持ち上げたりすると自動で消灯します。

2 完了後は自動で停止

乾燥・除菌が完了すると自動で停止します。

3 2年間の保証付

自然故障の場合、お買い上げ日より2年間は無償で交換します。

製品概要

- ・製品名：ドライキャップ UV3
- ・販売価格：19,800円(税込)
- ・保証期間：2年
- ・除菌方式：UV-C / LEDブルーライト
- ・紫外線波長：253.7nm
- ・青色光可視光線波長：465nm
- ・作動方式：USB-C リチウムイオン充電式
- ① 乾燥 & 除菌モード：満充電時、最大5回使用可能(120分)
- ② 除菌モード：満充電時、最大60回使用可能(2分)
- ・サイズ：幅144mm × 高さ96mm × 奥行き82mm
- ・重量：217g
- ・付属：USB-Cケーブル・AC充電器(1A出力)



スターキージャパン株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F

Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkeyjp.com

☎ 0120-045-190

ご相談・ご用命は当店へ